


GÖZ ÇEVRESİ CANLANDIRICI VE DUDAK BAKIMI CİHAZI IYO REVITALIZING EYE MASSAGER

TR Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

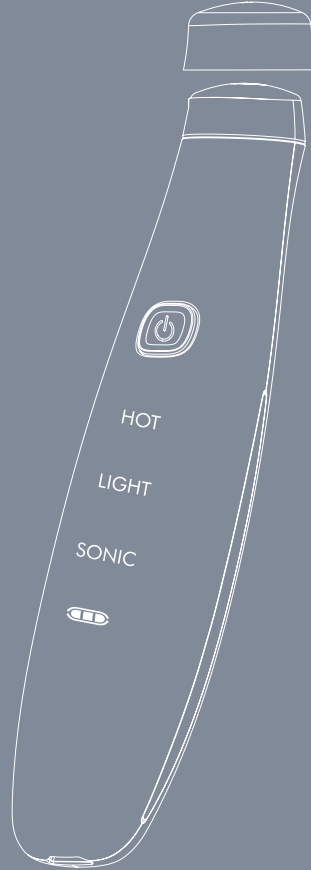

iyo

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....	02
01 // Kullanım Kılavuzundaki İşaretler.....	04
02 // Güvenlik Uyarıları.....	04
03 // Genel Bakış.....	07
03 // Ürün İçeriği.....	07
03 // Ürün Görseli ve Detaylı İsimler.....	07
04 // Kullanım.....	09
04 // Pili Şarj Etme.....	09
05 // Kalan Pil Kontrolü	09
05 // Cihazı Açma/Kapama.....	10
05 // Hangi Modda Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?.....	10
07 // Modların Kullanımı.....	11
08 // Kullanım Sonrası Temizlik.....	14
08 // Sorun Giderme.....	14
09 // Teknik Bilgiler.....	15
09 // İmha Etme.....	15
10 // Garanti Şartları.....	16

GÖZ ÇEVRESİ CANLANDIRICI VE DUDAK BAKIMI CİHAZI IYO REVITALIZING EYE MASSAGER

IYO REVITALIZING EYE MASSAGER, kendi profesyonel cilt bakımınızı ve masajınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde rahatlıkla yapabilmeyi sağlayan bir göz çevresi canlandırıcı cihazdır. Kolay kullanımı ve rahat taşınabilirliği sayesinde günlük hayatınızın yoğun temposunda dahi cilt bakımınızı yapabilmeyi ve cildinizin daha sağlıklı bir görünüme ulaşmasına yardımcı olur. Göz çevresi canlandırıcı cihazınızın üç farklı fonksiyonu vardır:

- Isıtma fonksiyonu ile gözlerinize sıcak masaj yapabilirsiniz, bu sayede kan dolaşımınız artmasını ve bakım ürünlerinizin emilimini sağlamaya yardımcı olur.
- Kırmızı renk terapisi fonksiyonu ile hücre aktivitesi uyarılarak cildinizdeki doğal kolajen ve elastin üretimi artmasına ve kırışıklıklarınızın azalmasına yardımcı olur.
- Mikro titreşim fonksiyonu ile kan dolaşımınız artmasını, bakım ürünlerinizin emilimi kolaylaşmasını ve, istenen etki daha da güçlenmesine yardımcı olur.

Göz çevresi canlandırıcı cihazınız yüzünüzün ihtiyacına göre Isıtma modu, Isıtma ve Kırmızı renk terapisi kombine modu, Isıtma, Kırmızı renk terapisi ve Mikro Titreşim kombine modu ile size üç farklı modda kullanım imkânı sunar.

Göz çevresi canlandırıcı cihazının IYO'nun önerdiği göz kremi ve serumuyla kullanılması tavsiye edilmektedir.



01 KULLANIM KILAVUZUNDAKİ İŞARETLER

⚠ Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

ℹ Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ve hasarlara karşı uyarır.


Kullanım öncesi bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz, ürünü kullanırken bu kılavuzda verilen talimatlara uyunuz.

⚠ Güvenlik Uyarıları

- Bu elektrikli alet çeşitli emniyet sistemlerine sahiptir, yinde ürünü kullanırken bu kılavuzda belirtilen temel güvenlik uyarılarına her zaman uymalısınız.
- Kullanım öncesi bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz, ürünü kullanırken bu kılavuzda verilen talimatlara uyunuz. Gerektiğinde sonradan tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayınız.
- Bu ürün yalnızca özel kullanım için tasarlanmıştır, güzellik merkezleri gibi ticari amaçlı kullanıma uygun değildir. Ürünü kullanım amacı dışında kullanmayınız.

Ürünü aşağıdaki durumlarda ve yerlerde kullanmayınız:

- Herhangi bir cilt tedavisi görüyorsanız veya bir cilt rahatsızlığınız varsa
- Aşırı bronzlaşmış bir cildiniz varsa
- Cildinizin kırmızı-mor renkte görünmesine sebep olan deri altı kanamanız varsa
- Yoğun iltihaplı, açık yara şeklinde veya kaşıntılı, kırmızı ya da döküntülü sivilcelerinizi varsa
- Işık alerjiniz varsa veya ışık alerjisine sebep olabilecek bir ilaç (tetrasiklin gibi) kullanıyorsanız
- Metal alerjiniz varsa
- Cilt yaranız varsa
- Kaşıntılı, kuru, döküntülü ve tahriş olmuş bir cildiniz varsa
- 18 yaşından küçükseniz
- Radyoterapi veya kemoterapi tedavisi alıyorsanız
- Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp pili kullanıyorsanız
- Tiroid hastasıysanız veya epilepsiniz varsa

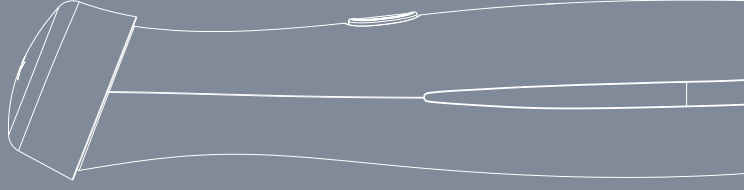

- Kan dolaşım bozukluğunuz veya şeker hastalığınız varsa, veremseniz, lupus hastasıysanız, vücudunuzda tümör varsa, yüzünüzde şiddetli ağrılara sebep olan sinirsel bir hastalığınız (yüz nevraljisi) varsa ya da genetik kaynaklı ışığa karşı aşırı duyarlılığa yol açan bir rahatsızlığınız (porfir) varsa
- Yüzde kemik kırılması veya kemik erimesi durumunuz varsa
- Hamileyseniz, emziriyorsanız veya regl dönemindeyseniz.
- Eğer önceden cildinize Botoks, dolgu gibi bir cilt tedavisi uygulandıysa, plastik cerrahi geçirdiyse veya emin olmadığınız bir durum varsa bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
- Bu ürünü göz, kulak, dudak, ağız içi ve özel bölgelerinizde kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlar olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye sebep olabilir, bu sebeple en yüksek seviyede dikkatli olmanızı gerektirir

⚠ TEHLİKE

- Bu ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Küçük çocuklarda boğulma tehlikesine sebep olabileceğinden, çocukları ürünün ambalajından uzak tutunuz.
- Çok hassas ciltleri olduğu için bu ürünü çocuklarda kullanmayınız. Bu ürün elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı kişilerde ancak yetişkinlerin gözetiminde, güvenli kullanım için talimatlara uyabilecekleri ve

olası tehlikeleri yeterince anladıkları durumda kullanılabilir veya ürün bakımı/temizliğini yapmak için izin verilebilir.

- Bu elektronik aleti, şarj adaptörünü veya USB kablosunu suya daldırmayınız, akan suda yıkamayınız.
- Ürünü akan suyun civarında veya içinde su bulunan yerlerin yakınında kullanmayınız, şarj etmeyiniz. Banyo gibi rutubetli yerlerde ürünü muhafaza etmeyiniz.
- Bu elektronik aleti şarj esnasında suya düşürürseniz, asla dokunmayınız. Şarj adaptörünü prizden veya USB kablosunu girişinden derhal çekiniz. Tekrar çalıştırmadan önce tüm bileşenlerin kurduğundan emin olunuz.
- Bu elektronik aleti şarj ederken USB girişine, adaptöre veya prize ıslak elle dokunmayınız.
- Şarj ederken cihazı kullanmayınız.
- Işık kaynağına direkt olarak çıplak gözle asla bakmayınız ya da cihazı gözlerinize tutmayınız.
- Bu elektronik aleti mutfak ocağı yakınında veya araba gibi sıcak ve tozlu yerlerde kullanmayınız, şarj etmeyiniz ve saklamayınız. Bu durum, ürünün bozulmasına veya ömrünün kısalmasına sebep olabilir.
- Ürünü yalnızca bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve şarj adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takınız.

01 KULLANIM KILAVUZUNDAKİ İŞARETLER

⚠ Güvenlik Uyarıları

- Ürün tamamen şarj olduğunda, fırtına esnasında veya ürün temizliği/bakımı öncesi adaptörünü prizden veya USB kablosunu bağlantı yuvasından çıkartınız.
- Ürününüzü kutuda verilen USB kablosu ile uyumlu bir adaptörle birlikte kullanınız.
- Gerekli durumda, USB kablosunu hızlı ve kolaylıkla çıkarabileceğiniz bir priz kullanınız. Kabloyu takılmalara sebep olmayacak şekilde yerleştiriniz, kabloyu bükmeyiniz veya sıkıştırmayınız, keskin kenarlı yüzeylerden veya cisimlerden uzak tutunuz.
- Ürünü yere düşürmeyiniz veya dışarıdan darbeye maruz bırakmayınız. Elektronik alette, şarj adaptöründe veya USB kablosunda gözle görülür hasar varsa ürünü kullanmayınız.
- Elektronik aleti parçalarına ayırmayınız veya parçalarda değişiklik yapmayınız. Gerekli onarımları yalnızca yetkili serviste yaptırınız. USB kablosu hasar gördüğünde yenisiyle değiştiriniz.

Aşağıdaki durumlar olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara sebep olabilir, bu sebeple çok dikkatli olmanız gerekir (UYARI)

- Aynı ürünü bir başkasıyla paylaşmayınız.
- Isıyı doğru şekilde algılayamıyorsanız bu ürünü kullanmayınız. Şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar, vücudun ısı algılama sistemini bozabilir. Engelli veya hasta kişiler çok sıcak hissettiklerinde bunu ifade edemeyebilirler. Bu sebeple bu kişilerde ürünü kullanmayınız.
- Sıcak masaj yaparken göz çevresi canlandırıcı cihazını gözünüzün aynı yerinde uzun süre tutmayınız, bu durum yanmayı sebep olabilir.

- Tavsiye edilen kullanım sıklığı 30 dakikalık günlük kullanım süresi ile günde bir kezdir.
- Önerilen kullanım sıklığı kişinin cilt tipine veya durumuna göre değişebilir. Cilt durumunuza göre kullanım sıklığınızı ayarlayınız.
- Ürünü kullanırken veya kullanım sonrası bir rahatsızlık hissederseniz, kullanımı derhal durdurunuz ve bir doktora danışınız.

Aşağıdaki durumlar olası hafif yaralanmalara ve maddi hasarlara sebep olabilir, bu sebeple dikkatli olmanız gerekir

DİKKAT

- Şarj adaptörünü prize takmadan önce USB kablosunu aletin şarj girişine, USP kablosunun diğer ucunu da adaptöre takınız.
- Her kullanım sonrası ürünü bir ıslak mendille, yumuşak kumaşla veya pamuklu çubukla iyice temizleyiniz. Temizlerken kimyasal kullanmayınız.
- Ürünü kullanmayacaksanız kapatınız ve bu şekilde muhafaza ediniz.
- Ürünün uzun süre kullanılmaması, pilin tamamen tükenmesine ve pil ömrünün kısalmasına sebep olabilir. Kullanılmadığı durumda, pil yılda iki defa tamamen deşarj edilip, yeniden şarj edilmelidir.

Ek Bilgiler

Hassas ciltli kişilerde deride şişlik ve tahriş meydana gelebilir. Gerekirse, kullanım öncesi ürünü alt kolunuzun altındaki bir bölgede test ediniz. Olası cilt reaksiyonlarını önlemek için göz çevresi canlandırıcı cihazını başlangıçta daha kısa bir süreliğine uygulayınız.

02 GENEL BAKIŞ



ÜRÜN İÇERİĞİ

Ürün kutusunda IYO REVITALIZING EYE MASSAGER ana ünitesi, koruyucu kapak, kullanım kılavuzu, USB şarj kablosu, saklama çantası ve temizleme mendili bulunmaktadır.

Temizleme Mendili



Saklama Çantası

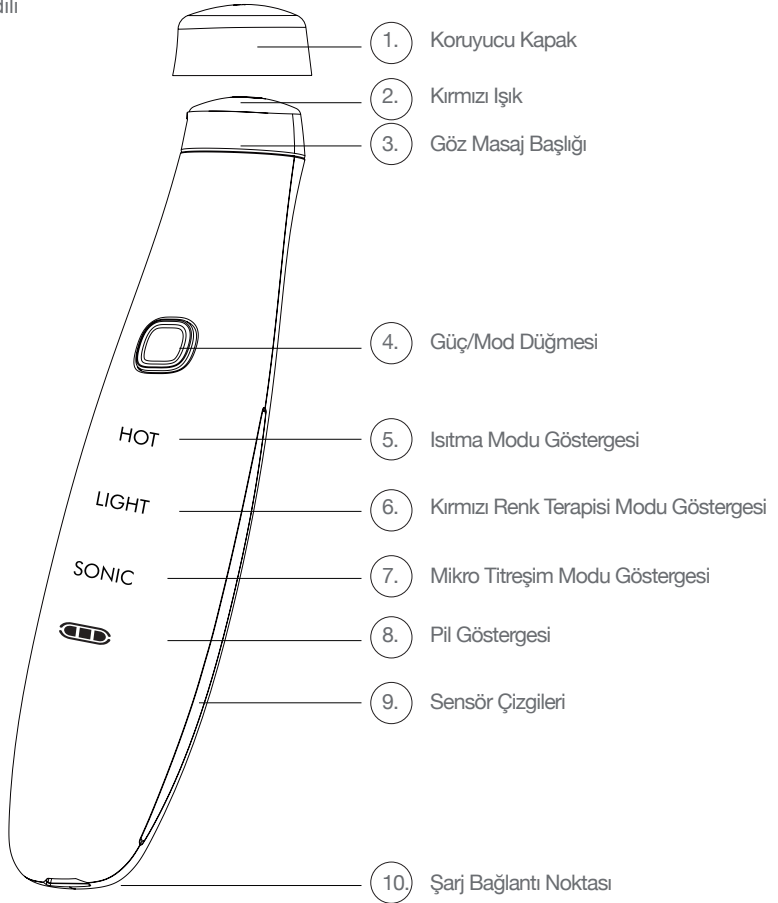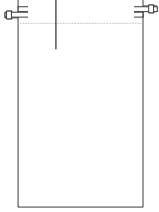

03 KULLANIM ALANLARI

UYGULAMA BÖLGELERİ

- Göz Çevresi
- Dudak Çevresi

Ciltteki Etkileri

- Göz çevresinde ve göz altında kan dolaşımını hızlandırıp şişlik, morluk, ince kırışıklıklar gibi istenmeyen problemleri azaltmaya yardımcı olan göz çevresi bakım cihazı.
- Mikro titreşim, kırmızı led ışık ve ısı enerjisi vererek bakım ürünlerinin cilt alt katmanına daha iyi iletilmesini sağlayarak bakımınızı gerçekleştirmeye yardımcı olur.
- Isıtma fonksiyonu ile aynı zamanda mikro titreşim, kırmızı led ışık ile kolajen üretimini tetikleyerek dudak üzeri ve çevresindeki ince kırışıklıkların görünümünü azaltırken oluşmasını engellemeye yardımcı olur.
- Kullanılan ürünlerin emilimini hızlandırmaya yardımcı olur.

04 CİHAZ KULLANIMI

Pili Şarj Etme

1. İlk kullanım öncesi, cihazı en az bir saat şarj ediniz.
2. Cihazı şarj etmek için öncelikle cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
3. USB kablосunu ana ünitadaki şarj bağlantı noktasına takınız, daha sonra kabloyu şarj adaptörüne bağlayınız.
4. Cihazı şarj etmek için kutudaki USB kablосunu DC 5V voltajından daha yüksek veya 1A'lık akım çıkışına sahip bir adaptöre (veya harici bataryaya) takınız. (Uygun olmayan bir adaptör kullanılması cihazın arızalanmasına neden olabilir.)
5. Cihazı şarj ederken şarj göstergesi kırmızı renkte görünür. Pil tamamen dolduğunda, şarj göstergesi mavi renkte yanar.
6. Pilin azalması durumunda, pil göstergesi arka arkaya 10 kez yanıp söner ve ardından cihaz otomatik olarak kapanır.



Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürer. Şarj süresi, kalan pil seviyesine, ortam sıcaklığına veya şarj koşullarına bağlı olarak değişebilir. Tamamen şarj edilmiş cihazınızı 80 dakika boyunca kullanabilirsiniz. Pili 10°C ila 40°C arasındaki sıcaklıklarda şarj ediniz. Pil kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Sıcaklık düştükçe çalışma süresi de düşer, çok yüksek sıcaklıklar pil kapasitesine negatif etki eder

Kalan Pil Kontrolü

Cihazı şarj ederken şarj göstergesi kırmızı renkte görünür. Pil tamamen dolduğunda, şarj göstergesi mavi renkte yanar.

Kullanım sırasında pilin azalması durumunda, pil göstergesi arka arkaya 10 kez yanıp söner ve ardından cihaz otomatik olarak kapanır.

04 CİHAZ KULLANIMI

Cihazı Açıp/Kapatma

- Cihazı açıp kapatmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutun.
- Cihaz 2 dakikalık akıllı otomatik zamanlamaya sahiptir. 2 dakikalık kullanım sonrası kendiliğinden kapanmaktadır.
- Ayarladığınız moddan bağımsız olarak cihazınızı dilediğiniz anda kapatabilirsiniz.

Hangi Modda Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Cihazınızın ısıtma, kırmızı renk terapisi ve mikro titreşim olmak üzere üç farklı modu bulunmaktadır. Güç/mod düğmesine her basıldığında, mod göstergesindeki bir sonraki modun ışığı yanar, mod göstergelerinde yanan ışık ilgili modun aktive olduğunu gösterir.

Modların Kullanımı

- Şarj ederken cihazı kullanmayınız.
- Işık kaynağına direkt olarak çıplak gözle asla bakmayınız ya da cihazı gözlerinize tutmayınız.
- Makyajlı iken bu ürünü kullanmayınız.
- Sıcak masaj yaparken göz çevresi canlandırıcı cihazını gözünüzün aynı yerinde uzun süre tutmayınız, bu durum yanmaya sebep olabilir.

04 CİHAZ KULLANIMI

Cihaz ile birlikte
kullanımı önerilen cilt
bakım ürünleri



Serum




Nemlendirici



Isıtma Modu

1. Yüz temizleme ürünü ile makyajınızı iyice temizleyiniz ve IYO'nun önerdiği göz kremi ve/veya serumunu eşit şekilde, göz altından şakak bölgesine doğru uygulayınız.

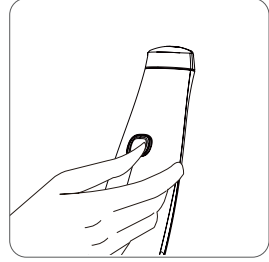

2. Cihazı ve Isıtma modunu açmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutunuz.



3. Göz pınarından başlayarak göz kenarı, şakak bölgesi ve üst göz kapağına kadar bir (C) harfi çizirmiş gibi göz masaj başlığı ile hafif bastırarak cildinize uygulama yapınız. Göz çevresine hafif bir masaj hissiyatı verir. Uygulama esnasında ısı hissedilebilir.

4. Uygulama süresi tek gözünüze için yaklaşık 1 dakikadır. Bip sesini duyduğunuzda diğer gözünüze geçiniz. Göz bölgesine her gün toplam 2'şer dakika uygulama yapılması tavsiye edilir. Size önerilen uygulama süresi aşıldığı takdirde göz bölgesinde hassasiyete sebep olabilir.

04 CİHAZ KULLANIMI

Isıtma ve Kırmızı Renk Terapisi Kombine Modu

1. Yüz temizleme ürünü ile makyajınızı iyice temizleyiniz ve IYO'nun önerdiği göz kremi ve/veya serumunu eşit şekilde, göz altından şakak bölgesine doğru uygulayınız.
2. Cihazı açmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutunuz. Ardından güç/mod düğmesine bir kez daha basınız. Cihazın üzerindeki Isıtma ve Kırmızı renk terapisi mod göstergelerinin yandığını göreceksiniz.
3. Göz pınarından başlayarak göz kenarı, şakak bölgesi ve üst göz kapağına kadar bir (C) harfi çizermiş gibi göz masaj başlığı ile hafif bastırarak cildinize uygulama yapınız. Göz çevresine hafif bir masaj hissiyatı verir. Uygulama esnasında ısı ve kırmızı ışık hissedilebilir.
4. Uygulama süresi tek gözünüz için yaklaşık 1 dakikadır. Bip sesini duyduğunuzda diğer gözünüze geçiniz. Göz bölgesine her gün toplam 2'şer dakika uygulama yapılması tavsiye edilir. Size önerilen uygulama süresi aşıldığı takdirde göz bölgesinde hassasiyete sebep olabilir.

Isıtma, Kırmızı Renk Terapisi ve Mikro Titreşim Kombine Modu

1. Yüz temizleme ürünü ile makyajınızı iyice temizleyiniz ve IYO'nun önerdiği göz kremi ve/veya serumunu eşit şekilde, göz altından şakak bölgesine doğru uygulayınız.
2. Cihazı açmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutunuz. Ardından güç/mod düğmesine iki kez daha basınız. Cihazın üzerindeki Isıtma, Kırmızı renk terapisi ve Mikro titreşim mod göstergelerinin yandığını göreceksiniz.
3. Göz pınarından başlayarak göz kenarı, şakak bölgesi ve üst göz kapağına kadar bir (C) harfi çizermiş gibi göz masaj başlığı ile hafif bastırarak cildinize uygulama yapınız. Göz çevresine hafif bir masaj hissiyatı verir. Uygulama esnasında ısı, kırmızı ışık ve titreşim hissedilebilir.
4. Uygulama süresi tek gözünüz için yaklaşık 1 dakikadır. Bip sesini duyduğunuzda diğer gözünüze geçiniz. Göz bölgesine her gün toplam 2'şer dakika uygulama yapılması tavsiye edilir. Size önerilen uygulama süresi aşıldığı takdirde göz bölgesinde hassasiyete sebep olabilir.

04 CİHAZ KULLANIMI

Dudak Çevresi Bakımı İçin Kullanım

- Yüzünüzü temizleyin.
- Ağız çevresi ve dudak üzerine serum sürülüp cihazın üç modunu aynı anda çalıştırarak kullanın.
- Dudak kenarından başlayarak dudak üzerine bir (C) harfi çizermiş gibi uygulama yapılır.
- Uygulama esnasında ısı titreşim ve kırmızı ışık hissedili .
- Göz çevresine hafif bir masaj hissiyatı verir.
- Her gün iki dakika uygulama yapılması tavsiye edilir.



Size önerilen dakikanın dışına çıkmadığı takdirde hassasiyetliğe sebebiyet verebilir.

Ayarladığınız moddan bağımsız olarak cihazınızı dilediğiniz anda kapatabilirsiniz. Cihazı kapatmak için güç/mod düğmesine birkaç saniye kadar basılı tutun.

Cihaz ile uygulamanız tamamlandığında, makyajınızı yapabilirsiniz.

05 KULLANIM SONRASI

TEMİZLİK

- Cihazı temizlemeden önce düğmeye basılı tutarak kapatınız.
- Her kullanım sonrası başlıkta kalan kozmetik ürünleri bir ıslak mendille, yumuşak kumaşla veya pamuklu çubukla iyice temizleyiniz. Temizlerken kimyasal kullanmayınız.



Cihazı suya sokmayınız veya akan suyun altında yıkamayınız.

Sorun Giderme

S: Cihaz uygun şekilde çalışmıyor.

C: Pil bitmiş ya da azalmış olabilir. Cihazı şarj ettikten sonra tekrar deneyiniz. Hala çalışmıyorsa, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz.

S: Pil göstergesinde ışık yanmıyor.

C: USB kablosu doğru bir şekilde takılmamış olabilir. USB kablosunu şarj bağlantı noktasına doğru şekilde takınız.

S: Cihaz kullanımından sonra masaj başlığı hala sıcak.

C: Bu normaldir, herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur

S: Cihazı kullanmadığım sırada cilt tahrişim devam ediyor.

C: Cihazı kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

S: Plastik cerrahi (Botoks, dolgu vb. dahil) geçirmiş olmam durumunda cihazı kullanabilir miyim?

C: Cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Teknik Bilgiler

Boyut (GxDxY)	31,2x23,28x136,28 (mm)
Ağırlık	120 g
Malzeme	A.B.S
Güç Tüketimi	2,1 W
Şarj Gücü	D.C. 5,0V / 1 A
Güç Kaynağı	Li-polimer, 3,7V / 800mAh
Kullanım için Önlemler	Kullanım kılavuzunda belirtilmektedir

Pil özellikleri önceden haber verilmeksizin benzer ürünlerle değiştirilebilir.
Üretici/İmalatçı bilgileri ilerleyen sayfalarda bulunmaktadır.

06 İMHA ETME

1. Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm sayesinde atıkları azalı ve çevre korunur.
2. Ambalajı malzeme türüne göre imha ediniz. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
3. Bu sembole işaretlenen cihazlar ve boş şarjlı piller, ev atıkları
4. ile birlikte atılmamalıdır.
5. Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde boş şarjlı pilleri beldenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.
6. Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim ediniz.
7. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



07 GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.

2) Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

3) Kullanıcının malı tanıtmaya ve kullanımı kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisidir.

4) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

5) Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.

6) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.

8) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.

9) İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.

10) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

11) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.

12) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

13) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,

b) Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirin mümkün olmadığını yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.


14) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranı bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

15) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

16) Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.


17) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

18) Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

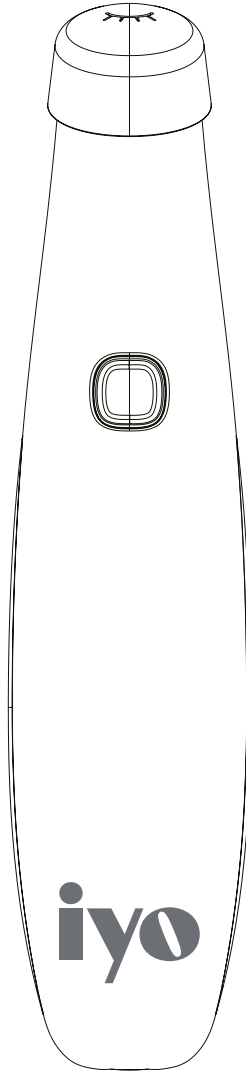



Üretici/İthalatçı:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39
K.Çekmece/İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 212 249 70 69
Faks: +90 212 293 39 11
Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den
ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri : 444 0 241
www.fakir.com.tr

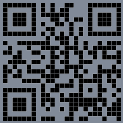

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de

