

EMS+RF Modu



Yüz temizlenir; İyo'nun önerdiği krem veya serum ile kullanılması tavsiye edilmektedir.



Her gün cildin lifting yönüne doğru hafif dairesel hareketler ile toplamda tüm yüze 6 dakika uygulanması tavsiye edilir.

Boyun ve dekolte bölgeleri için 2'şer dakikalık uygulamalar yapılır.

iyo



RF Modu



Yüz temizlenir; İyo'nun önerdiği krem veya serum ile kullanılması tavsiye edilmektedir.




Her gün cildin lifting yönüne doğru hafif dairesel hareketler ile toplamda tüm yüze 6 dakika uygulanması tavsiye edilir.

Boyun ve dekolte bölgeleri için 2'şer dakikalık uygulamalar yapılır.

7

EMS Modu

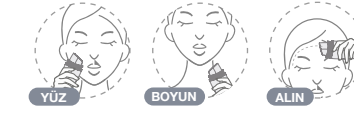

Yüz temizlenir; temizlenmiş cildin üzerine haftada bir gün sadece EMS DIAMOND modu yüz ve boyun bölgesine İyo'nun tavsiye edilen serum sürülerek uygulanması tavsiye edilir.



Yüzü ikiye ayırıp önce sağ yüze, boyuna ve alın bölgesine serum uygulanır ardından EMS modu çalıştırılarak çene kontürü, elmacık kemiği, alın ve boyun bölgelerine uygulama yapılır.

3 BOYUTLU ELMAS SİLİNDİR BAŞLIĞI

Yüz ve alın bölgesine toplamda 3'er dakika uygulanması tavsiye edilir. Boyun bölgesine toplamda 2 dakika uygulama yapılır.



8

Kullanım Alanları Uygulama Bölgeleri



YÜZ



DUDAK KENARLARI



DEKOLTE



ALIN



BOYUN



9

Trio RF Facial Care

Radyo Frekans
Teknolojili Yüz
Bakım Cihazı



iyo

İYO
kendinizin en
iyi versiyonu
olma yolunda
sizin yanınızda.





**İhtiyaçlarını önem-
siyor,
anlıyor ve
içten dışa
iyiliğini
düşünüyoruz.**

Cihaz Teknolojileri


EMS+RF Teknolojisi ve Kırmızı Led Işık

EMS+ RF teknolojileri kırmızı LED ışığı ve titreşiminden faydalanır. Yüzdeki kasları güçlendirip kasın yapısının yoğunluğunu arttırmaya, ısı etkisiyle beraber hücre metabolizmasında canlanma ve kolajen yenilenmesini sağlayarak cildin sıkılaşmasına ve gerginliğinin artmasına yardımcı olur.

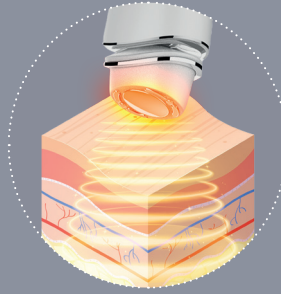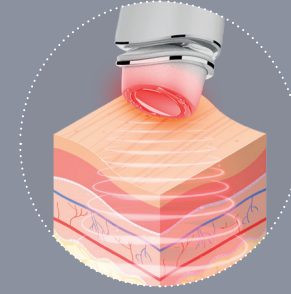

RF Teknolojisi ve Sarı Led Işık





RF teknolojisi ve sarı LED ışıktan faydalanır. Isı etkisiyle ciltte gerginliği sağlayan kolajen ve elastin üretimini uyararak cildin sıkılaşmasına, gerginliğinin artmasına yardımcı olur. Masaj işlevi ile cildin dolgunlaşmasına ve pürüzsüzleşmesine destek olur.

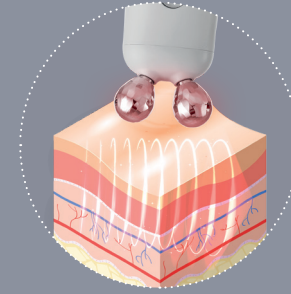

EMS Teknolojisi ve Çift Taraflı Mikro Akım

EMS teknolojisi, çift frekanslı mikro akım ve 3 boyutlu elmas silindiler ile yüzdeki kasları güçlendirip kas yapısının yoğunluğunu arttırmaya ve yüz konturunu etkili bir şekilde şekillendirmeye yardımcı olur.

Modlar Nasıl Kullanılır?

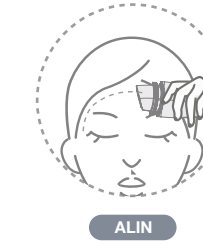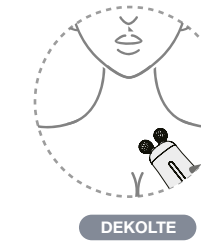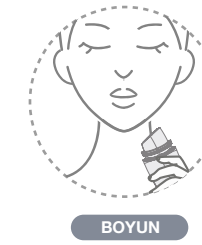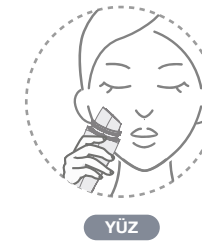

Ciltteki Etkileri

Günlük düzenli kullanım ve uygulama için uygundur.



Lifting özelliği cildi dolgunlaştırarak yüzün yukarı kalkmasına yardımcı olur.



Yüz ve boyun bölgesindeki ince kırışıklıkların açılmasına destekler.



Cildin gerginliğini ve sıklığını arttırmaya yardımcı olur.



Cilt altındaki kasları çalıştırarak sarkmaların toparlanmasını destekler.



Kullanılan ürünlerin emilimini hızlandırmaya yardımcı olur.

