


## Heating Modu Nasıl Kullanılır?




1. Yüz temizleme ürünü ile makyajınızı iyice temizleyiniz ve cilt bakım ürünlerinizi yüzünüze eşit şekilde uygulayınız.
2. IYO'nun önerdiği yüz serumu veya nemlendirici krem ile uygulanması tavsiye edilir.
3. Önceden ısıtılmış cihazı kullanarak yüzünüze masaj yapınız.
4. Uygulama süresi yaklaşık 5 dakika olacak şekilde masaj yapmaya devam ediniz.
5. Her gün kullanım için uygundur.

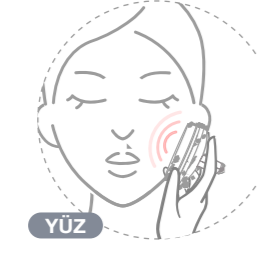

## Anti-Aging Modu Nasıl Kullanılır?



1. Cilt bakım ürünlerinizi yüzünüze eşit şekilde uygulayınız.
2. IYO'nun önerdiği yüz serumu veya nemlendirici krem ile uygulanması tavsiye edilir.
3. Cilt dokusu yönünde masaj yapar gibi cihazı yüzünüzde gezdiriniz.
4. Gözler veya alın gibi kırışıklık bölgelerine masaj yapmaya özen gösteriniz.
5. Uygulama süresi yaklaşık 5 dakika olacak şekilde masaj yapmaya devam ediniz.
6. Her gün kullanım için uygundur.

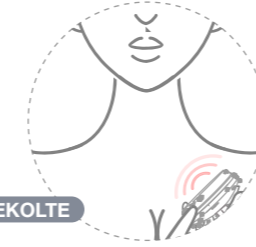

## Kullanım Alanları Uygulama Bölgeleri


1. Her gün 1 kez kullanım için uygundur.




## Brightening Modu Nasıl Kullanılır?




1. Cilt bakım ürünlerinizi yüzünüze eşit şekilde uygulayınız.
2. IYO'nun önerdiği yüz serumu veya nemlendirici krem ile uygulanması tavsiye edilir.
3. Yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapınız.
4. Uygulama süresi yaklaşık 5 dakika olacak şekilde masaj yapmaya devam ediniz.
5. Her gün kullanım için uygundur.

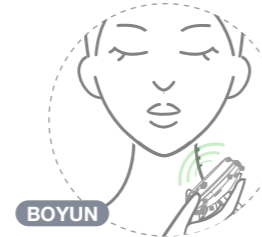

## Lifting Modu Nasıl Kullanılır?

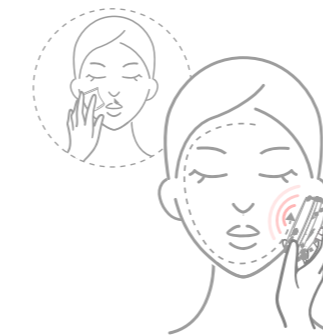

1. Cilt bakım ürünlerinizi yüzünüze eşit şekilde uygulayınız.
2. IYO'nun önerdiği yüz serumu veya nemlendirici krem ile uygulanması tavsiye edilir.
3. Çene çizgisinden ve şakaklardan yukarı doğru, ayrıca elmacık kemiğinden dışarı doğru yüzünüze masaj yapınız.
4. Uygulama süresi yaklaşık 5 dakika olacak şekilde masaj yapmaya devam ediniz.
5. Her gün kullanım için uygundur.

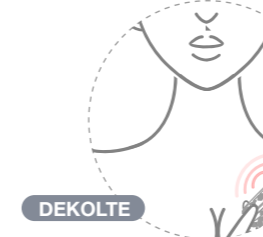

# Compact Collagen Booster

Kompakt Kolajen  
Yüz Bakım  
Cihazı



iyo

7

iyo

8

9

iyo

10



İYO,  
kendinizin en  
iyi versiyonu  
olma yolunda  
sizin yanınızda.




İhtiyaçlarını  
önemsiyor,  
anlıyor ve  
içten dışa  
iyiliğini  
düşünüyoruz.

## Cihazın Modları Nelerdir?

### Heating Mode

Beyaz Işık - Isı  
(Başlangıç Süresini Gösterir)


Uygun cilt bakımından önce optimize edilmiş bir cilt durumu oluşturmak için başlangıç modu 42°C'lik ısıtma fonksiyonu ile yüzünüze sıcak masaj yapabilirsiniz, bu sayede kan dolaşımınız artar, bakım ürünlerinizin emilimi kolaylaşır.

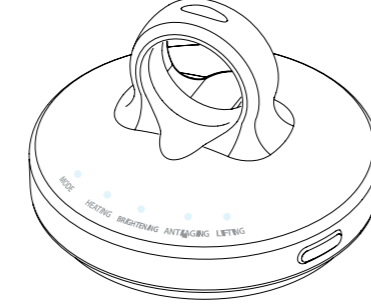

### Brightening Mode

Yeşil Işık Terapisi-Mikro Titreşim  
(Aydınlatıcı Modu)


Mikro akım, yeşil renk terapisi mikro titreşim ve yeşil LED'in çalışması, bu mod daha parlak ve kusursuz bir cilt tonu oluşturmak için kullanılır.

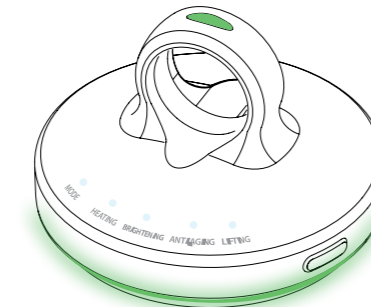

### Anti-Aging Mode

Kırmızı Işık-Mikro Akım-Mikro Titreşim ve Isı  
(RF) (Yaşlanma Karşiti)


Mikro akım, mikro titreşim, mikro ısıtma fonksiyonu ve kırmızı renk terapisi. Bu mod cilde canlılık sağlar, ince çizgileri ve kırışıklıkları yatıştırmasına yardımcı olur.

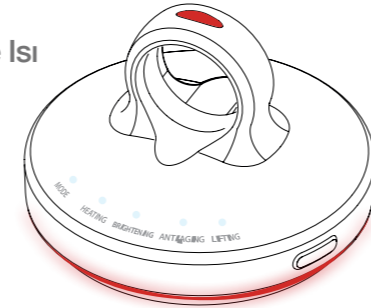

### Lifting Mode

Kırmızı/Mavi Işık-Mikro Titreşim-Miko Akım  
(Germe Modu)


Mikro akım, mikro titreşim kırmızı/mavi renk terapisi. Bu mod ciltte lifting etkisi ve elastikiyet sağlanmasına yardımcı olur.

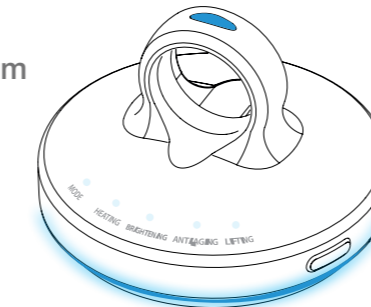

## Cihaz Teknolojileri


### Beyaz ve Yeşil Işık

Cilt renk tonunu eşitler, cildi aydınlatır, melanositleri üreten hücreleri hedef alarak fazla melanin (cilde renk veren pigment) üretiminin engellenmesine yardımcı olur.

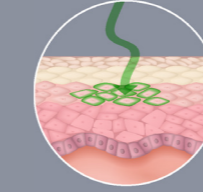


### Kırmızı Işık

Kolajen üretimini artırmasına, hasarlı dokuların yenilenmesine ve kırışıklıkların azalmasına fayda sağlanmasına yardımcı olur.

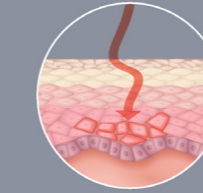


### Kırmızı ve Mavi Işık

Kolajen üretimini artırmasına, hasarlı dokuların yenilenmesine ve kırışıklıkların azalmasına fayda sağlanmasına yardımcı olur. Yağlı ve yoğun akneli ciltlerin sakinleşmesinde kullanılmaktadır.

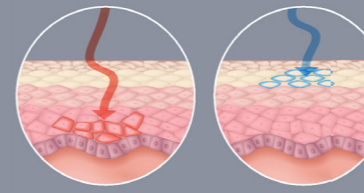

### Mikro Titreşim

Mikro titreşim fonksiyonu ile kan dolaşımının artmasına, bakım ürünlerinin emiliminin kolaylaşmasına ve istenen etkinin daha da güçlenmesine yardımcı olur.

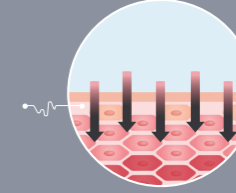

### Galvanik-Mikro Akım

Galvanik-mikro akım fonksiyonu ile cildinizin gerginleşmesini, yüz kaslarınızın sıkılaşmasını ve kolajen uyarılmayı destekler



## Ciltteki Etkileri



Ciltteki kolajen ve elastin sentezini artmasını destekler.



Hücre yenilenmesini sağlamaya yardımcı olur.



Çene ovalindeki sarkan dokuyu toparlamaya yardımcı olur.



İnce kırışıkların açılmasına sağlamaya yardımcı olur.



Kullanılan ürünlerin emilimini hızlandırmaya yardımcı olmak.

iyoo

