


## Kullanım Alanları


### Uygulama Bölgeleri

Cilt probleminde uygun mod ve rengi seçilerek, tüm yüz bölgesine toplamda 10 dakika haftada 1 defa uygulanır.

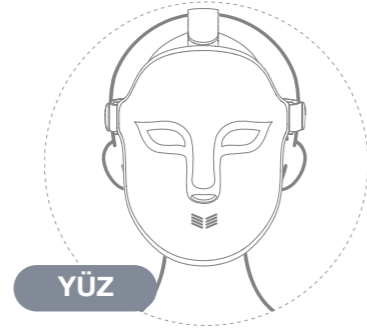

### Nasıl Kullanılır?

1. Yüzünüzü temizleyin.
2. İYO'nun önerdiği serum veya kağıt maskeyi uygulayın.
3. Kumandayı ve yüz maskesini birbirine bağlayın.
4. Destek kumandasından mod seçimini yapın ve yüz bakımınıza başlayın.

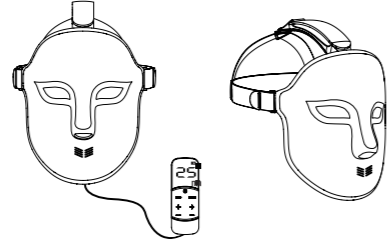

# Cihazın Modları Nelerdir?

## Otomatik Mod

3 ışık belirli süreler ile yanar, toplam süresi 25 dakikadır. Kırmızı ışık 9 dakika, sarı ışık 8 dakika, mavi ışık 7 dakika sürer. Otomatik modda varsayılan parlaklık orta ayardadır. Süre dolduğunda otomatik olarak kapanır.

## Manuel Mod

Kırmızı, mavi ve sarı ışık arasında manuel seçilerek ayarlanır. Her bir ışık için varsayılan süreler göre seçim yapılabilir. Süre manuel olarak artırılıp, azaltılabilir. Yoğunluk istenilene göre ayarlanabilir. Ayarlanan süre sonunda cihaz otomatik olarak kapanır.



# Led Light Face Mask

Led Yüz Maskesi



iyo

iyo

Led Light Face Mask

Cildinin ihtiyaçlarını anlayan İYO ile en iyi versiyonunuz olun.





Her anınızda; canlı, parlak ve sağlıklı görünen bir cildin ayrıcalığını yaşayın.

# Cihaz Teknolojileri


## Kırmızı Renk Terapisi

Kırmızı renk terapisi ( $630 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ ) ile hücre aktivitesi uyarılarak ciltteki doğal kolajen ve elastin üretimi artmasına, kırışıklıkların azalmasına, cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur.

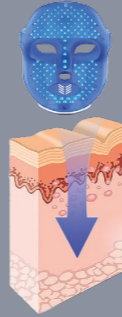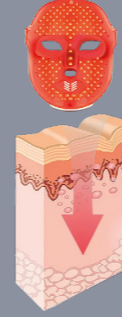

## Mavi Renk Terapisi

Mavi renk terapisi ( $415 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ ) ile ciltteki akne bakterilerin azalmasına yardımcı olur, bu sayede cilt rahatsızlığının ve hafif ve orta düzeydeki iltihaplı sivilcelerin düzelmesine yardımcı olur.

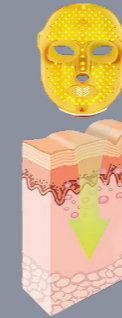

## Sarı Renk Terapisi

Sarı renk terapisi ( $583 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ ) ile kan dolaşımının hızlanmasına, hücrelerin yenilenmesine ve cilt lekelerin azalmasına yardımcı olur.

# Ciltteki Etkileri



Yağlı ciltlerde yağı dengeleyerek akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur.




Ciltte oluşan kızamıklığın sakinleşmesine yardımcı olur.



Cilde parlaklık ve canlılık kazandırmayı destekler. Renk tonunu eşitlemeye yardımcı olur.



Cildin nem seviyesini arttırmayı destekler.

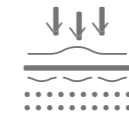

Lazer ve kimyasal peeling sonrası oluşan kızamıklığın sakinleşmesini sağlamaya yardımcı olur.



iyo