



Göz Çevresi İçin Nasıl Kullanılır?

- Yüzünüzü temizleyin.
- İYO'nun önerdiği serum göz çevresine sürülür.
- Cihazı çalıştırın ve üç modu aynı anda kullanarak uygulama yapılır.
- Kullanmak istediğiniz modu seçin.
- Cihaz ile sol göz üzerinde 2 dakika boyunca göz pınarından başlayarak göz kenarı şakak bölgesi ve üst göz kapağına kadar bir (C) harfi çizmiş gibi uygulama yapılır.
- Sağ göze de aynı işlem 2 dakika boyunca yapılır.
- Her gün bir kere her bir gözün çevresi için iki dakika uygulama yapılması tavsiye edilir.

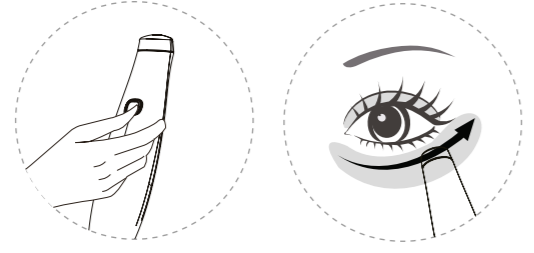

Dudak Çevresi İçin Nasıl Kullanılır?

- Yüzünüzü temizleyin.
- Dudak çevrenize İYO'nun önerdiği serumu uygulayın.
- Cihazın 3 modunu aynı anda çalıştırarak kullanın.
- Dudak kenarından başlayarak dudak üzerine bir "C" harfi çizmiş gibi uygulama yapılır.
- Her gün yaklaşık 2 dakika uygulanması tavsiye edilir.

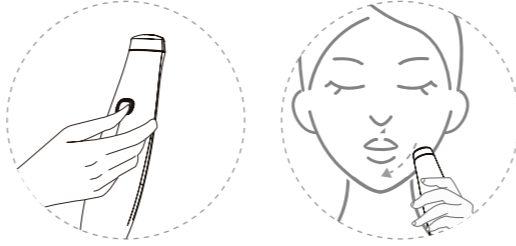

Kullanım Alanları Uygulama Bölgeleri

- Her gün bir kere her bir gözün çevresi için iki dakika uygulama yapılması tavsiye edilir.



GÖZ ÇEVRESİ



DUDAK ÇEVRESİ

Revitalizing Eye Massager

Göz Çevresi Canlandırıcı ve Dudak Bakım Cihazı



iyo

iyo

Revitalizing Eye Massager


Yatıştırıcı ısı terapisi, canlandırıcı sonik titreşim ve gençleştirici kırmızı ışık terapisi!



Taşınabilir kompakt tasarımı ile her an, her yerde yanınızda.




Cihaz Teknolojileri

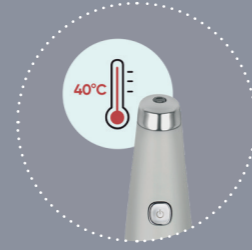


Isıtma Modu

Sıcak mod fonksiyonu ile kan dolaşımınız artmasına ve ısı ile masaj yaparak yorgun gözleri rahatlatmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bakım ürünlerinin emilimini kolaylaştırmaya destek sağlar.

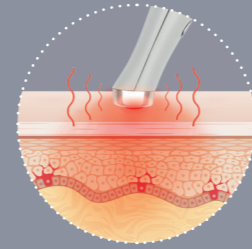

Kırmızı Işık Terapisi

Kırmızı ışık terapi fonksiyonu ile hücre aktivitesi uyanılarak cildinizdeki doğal kolajen ve elastin üretimi artmasına ve ince kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur.

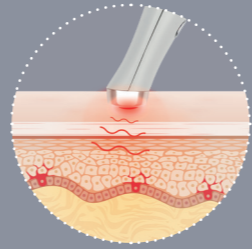

Mikro Titreşim

Mikro titreşim fonksiyonu ile kan dolaşımınız artmasına bununla birlikte şişlikleri ve koyu halkaları azaltmaya yardımcı olur.

Ciltteki Etkileri



Göz çevresindeki şişlik, morluk ve ince kırışıklıklar gibi problemleri azaltmaya yardımcı olur.



Cilt bakım ürünlerinin cildin alt katmanlarına daha iyi iletilmesini destekler.



Kullanılan bakım ürünlerinin emilimini hızlandırmaya yardımcı olur.



Kolajen üretimini tetikler. Dudak çevresindeki ince kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.



Tek cihaz ile 2 farklı fonksiyon; "göz ve dudak çevresi bakımı"

iyo

1

3

4