

## Galvanik Akım, Kırmızı LED Işık Terapisi, Ultrasonik Dalga ve Mikro Titreşim Modu Nasıl Kullanılır?

- Makyajınızı bir pamuk yardımıyla temizledikten sonra cildinizi hafifçe nemlendirin.
- Yüz temizleme ürününüzü uygulayın ve köpürtün.
- Cihazın güç düğmesine 2 saniye kadar basılı tutun. “Bip” sesinden sonra ultrasonik dalgalar aktive olacak ve LED ışıklar yanacaktır.
- Cihazı kavrama yerinden tutun ve iç orta kısımdaki metal alanın cildinize temas ettiğinden emin olun.
- Cilde temas ettiğinde galvanik akım ve mikro titreşim fonksiyonları çalışmaya başlar.
- Titreşim yoğunluğunu güç düğmesinden ayarlayabilirsiniz.



### Kullanım Alanları Uygulama Bölgeleri

İYO'nun önerdiği yüz temizleme ürünü ile birlikte günde 1 defa, akşamları kullanılması tavsiye edilir. Tüm yüze toplamda 2 dakika boyunca uygulanır.



YÜZ

5

# Ultrasonic Wave Face Cleanser

Ultrasonik Akımlı  
Yüz Temizleme  
Cihazı



iyo

4

iyo


Ultrasonic Wave Face  
Cleanser

Profesyonel  
cilt bakımı  
deneyimi için  
İYO ürünlerini  
keşfedin.




İYO, seni ve  
cildini iyi olma  
yolculuğuna  
davet ediyor.

# Cihaz Teknolojileri

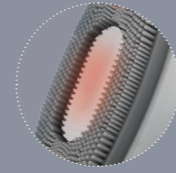


## Galvanik Akım

1mA altındaki akım iyon akımı yöntemiyle cildi mikro düzeyde uyarır ve aynı zamanda ultrasonik titreşimler göndererek siyah noktaları ve gözeneklerin içindeki kirleri toplayarak cildin temizlenmesine yardımcı olur.

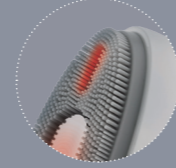


## Kırmızı Led Işık Terapisi

Ciltteki kolajen üretimini tetikler, hücre yenilenmesini sağlar, cildin sakinleşmesine yardımcı olur.

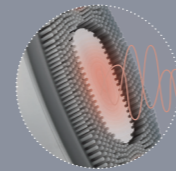

## Ultrasonik Dalga ve Mikro Titreşim

Yüksek frekanslı ses ve titreşim olarak ifade edilir. Ultrasonik dalga ile saniyede 1 milyon kez oluşan dalga, cildi kirden arındırmaya yardımcı olur, kolajen ve elastin üretimini uyarır, cildin elastikiyetini artırmayı destekler.

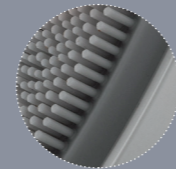

## Silikon Fırça

Oval şekilli fırça, "T" bölgesi gibi zor yüzeylere mükemmel şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Üç farklı çaptan oluşan toplam 1.000 adet silikon fırça cildin derinlenmesine yardımcı olur.


# Ciltteki Etkileri



Galvanik akım, gözeneklerin içinde birikmiş olan kirleri etkili bir şekilde toplayarak, gözeneklerin içini derinlemesine temizlemeye yardımcı olur.




LED ışık terapisi ile kan dolaşımını hızlandırır, hücrelerin yenilenmesini sağlar, cildi sakinleştirmeye yardımcı olur.

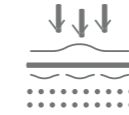

Mikro titreşim ile 2 dakikada gözeneklerin içerisindeki kalıntıları giderir, aktif maddelerin emilimini hızlandırmaya yardımcı olur.



Silikon fırça özelliği sayesinde cildi nazikçe temizler, bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

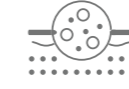

Hijyenik ve hipoalerjeniktir.



Cildinizin siyah noktalardan arınmış, pürüzsüz, daha canlı ve daha parlak görünmesini sağlayama yardımcı olur.

